



Support pour trachéostome

La canule Provox® LaryTube™ permet l'utilisation des Provox HME Cassettes et favorise la protection et la réhabilitation pulmonaires des patients laryngectomisés présentant un trachéostome instable ou profond. Les Provox LaryTubes permettent également l'emploi postopératoire immédiat d'un HME. Les patients à la peau très sensible, par exemple durant la période de


radiothérapie, peuvent utiliser les Provox LaryTube lorsqu'aucun adhésif ne peut être employé. Les Provox LaryTubes sont en silicone souple et flexible, mais suffisamment rigide. Leur forme anatomique conique contribue à l'optimisation du joint autour du trachéostome.




Disponible en trois versions :

- La **version Fenestrated**, destinée à une utilisation **conjointe avec une prothèse phonatoire**. Plusieurs petites perforations préférées à une seule de grande taille, évitent le blocage et un déplacement accidentel de la prothèse phonatoire. La Provox Brush (7204), normalement utilisée pour le nettoyage des prothèses phonatoires Provox, convient également au nettoyage des perforations du LaryTube.
- La **version Standard**, destinée à une utilisation **sans prothèse phonatoire** ou lorsqu'une **perforation sur mesure** au moyen du FenestrationPunch (perforateur) est préférable.
- La **version With Ring** (anneau bleu), à porter avec un **support adhésif**. Recommandée si une canule n'est employée que la nuit ou avec le Provox FreeHands HME pour soutenir le joint du trachéostome.



Les LaryTube Standard et Fenestrated sont sécurisés par un ruban. Le LaryTube with Ring (avec anneau) est maintenu par un support adhésif.

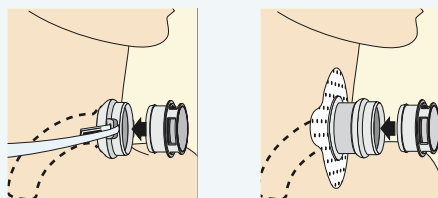

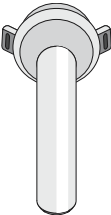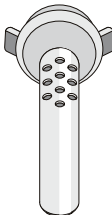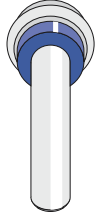LaryTube	Standard	DI	DE	L	RÉF.	Fenestrated	DI	DE	L	RÉF.	with Ring	DI	DE	L	RÉF.			
LaryTube 8/27		9,5	12,0	27	7601		-	-	-	-		-	-	-	-			
LaryTube 8/36		9,5	12,0	36	7602		9,5	12,0	36	7637		9,5	12,0	36	7624			
LaryTube 8/55		9,5	12,0	55	7603		9,5	12,0	55	7638		9,5	12,0	55	7625			
LaryTube 9/27		10,5	13,5	27	7605		-	-	-	-		-	-	-	-			
LaryTube 9/36		10,5	13,5	36	7606		10,5	13,5	36	7640		10,5	13,5	36	7626			
LaryTube 9/55		10,5	13,5	55	7607		10,5	13,5	55	7641		10,5	13,5	55	7627			
LaryTube 10/27		12,0	15,0	27	7609		-	-	-	-		-	-	-	-			
LaryTube 10/36		12,0	15,0	36	7610		12,0	15,0	36	7643		12,0	15,0	36	7628			
LaryTube 10/55		12,0	15,0	55	7611		12,0	15,0	55	7644		12,0	15,0	55	7629			
LaryTube 12/27		13,5	17,0	27	7613		-	-	-	-		-	-	-	-			
LaryTube 12/36		13,5	17,0	36	7614		13,5	17,0	36	7646		13,5	17,0	36	7630			
LaryTube 12/55		13,5	17,0	55	7615		13,5	17,0	55	7647		13,5	17,0	55	7631			
		La Provox LaryTube Standard inclut : 5 HiFlow Cassettes (7241).					La Provox LaryTube Fenestrated inclut : 5 HiFlow Cassettes (7241) et 1 Provox Brush (7204).					La Provox LaryTube with Ring inclut : 5 HiFlow Cassettes (7241), 1 FlexiDerm Oval (7254).						

DI = diamètre interne, DE = diamètre externe, L = longueur (en mm).

Provox® LaryButton™



Le Provox LaryButton est une canule trachéale courte en silicone, tenant seule en place. Il maintient le trachéostome ouvert et sert de support pour d'autres dispositifs de réhabilitation du système Provox, comme les cassettes HME ou la Provox FreeHands HME.

La principale différence entre le LaryButton et le LaryTube est la capacité du LaryButton de tenir seul dans le trachéostome. Une fois inséré, il reste en place en profitant de l'élasticité tissulaire de l'ouverture trachéale, ce qui contribue à créer avec le LaryButton un raccord étanche. Bien entendu, ceci empêche également le rétrécissement du trachéostome.

Si nécessaire, les ailettes sur la portion externe du Provox LaryButton peuvent être utilisées pour le maintenir en place à l'aide d'un Provox LaryClip ou Provox Tube Holder, pour éviter tout déplacement accidentel.

Le Provox LaryButton est particulièrement bien adapté aux patients dont le trachéostome présente un bourrelet circulaire sur son bord. Cependant, les autres patients peuvent également bénéficier de son utilisation.

Pour permettre le choix correct de la taille, le Provox LaryButton Sizer Kit contient des boutons, de différentes tailles et longueurs, stérilisables et réutilisables.

Principales caractéristiques :



Efficace.



La forme conique facilite un ajustement étanche ainsi que le positionnement près du trachéostome du Provox LaryButton.

Compatible.

Le Provox LaryButton est destiné à être porté en combinaison avec le système Provox HME, en assurant une stabilité et un ajustement optimal.

Souple.

Sa constitution en matériau silicone souple et sa forme atraumatique réduisent les éventuels effets secondaires, tels que l'irritation du trachéostome ou un saignement.

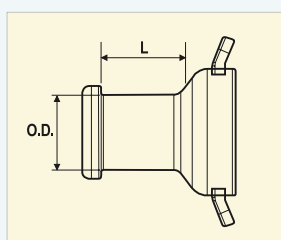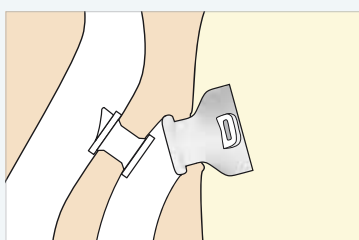

Informations pour la commande	OD	L	RÉF
Provox LaryButton 12/8	12	8	7671
Provox LaryButton 14/8	14	8	7672
Provox LaryButton 16/8	16	8	7673
Provox LaryButton 18/8	18	8	7674
Provox LaryButton 12/18	12	18	7685
Provox LaryButton 14/18	14	18	7686
Provox LaryButton 16/18	16	18	7687
Provox LaryButton 18/18	18	18	7688
Non stérile, à usage personnel d'un seul patient. Durée d'utilisation maximum : 6 mois.			
Provox LaryButton Sizer Kit			7690
Non stérile, réutilisable, stérilisable (les boutons « Sizer » et les étuis individuels). La boîte de rangement peut être nettoyée au lave-vaisselle.			
OD = Outer Diameter, diamètre externe. L = longueur. (en mm).			

Le nouveau Provox LaryClip breveté est un ensemble de deux pièces contribuant à optimiser un ajustement étanche du Provox LaryButton et du Provox LaryTube au trachéostome.


Il est constitué d'une base adhésive carrée et d'un clip détachable permettant un ajustement optimal aux ailettes du Provox LaryButton et LaryTube.

Lorsque les bases adhésives collées des deux côtés du trachéostome finissent par se décoller de la peau, la partie Clip peut être enlevée et refixée selon le besoin.




Principales caractéristiques :

- Augmenter la possibilité d'utilisation du Provox LaryButton
- Simplicité de fixation
- Forte adhésivité de type FlexiDerm
- Peut être fixé à la partie optimale de la peau autour du trachéostome
- Alternative à l'utilisation d'un cordon d'encolure

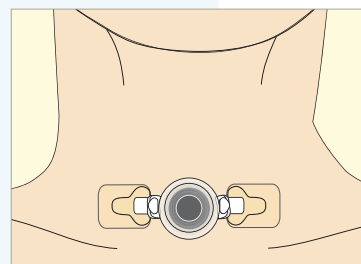

Informations pour la commande	Quantité	RÉF
Provox LaryClip	Kit complet : 8 unités LaryClip, 40 unités LaryClip Base	7669
Non stérile, à usage personnel d'un seul patient.		

Provox® FenestrationPunch

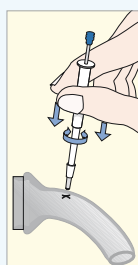

Le Provox FenestrationPunch permet de réaliser de petites perforations aux emplacements souhaités de la canule LaryTube.

Informations pour la commande	Quantité	RÉF.
Provox FenestrationPunch	1 unité	7654
Non stérile, réutilisable, stérilisable.		

Provox® TubeBrush



Nouveau design pour une manipulation plus aisée et une hygiène améliorée.

Informations pour la commande	Taille Ø	Quantité	RÉF.
Provox TubeBrush	9 mm	6 unités	7660
Provox TubeBrush	13 mm	6 unités	7661
Non stérile, réutilisable. A usage personnel d'un seul patient.			

Provox® TubeHolder



Le nouveau Provox TubeHolder a été développé pour un usage exclusif avec le Provox LaryTube et le Provox LaryButton.

Les connecteurs clip intégrés permettent une fixation optimale aux ailettes du Provox LaryTube et LaryButton, réduisant la tension exercée au niveau du matériau silicone souple.

Informations pour la commande	Quantité	RÉF.
Provox TubeHolder	1 unité	7668
Non stérile, réutilisable. A usage personnel d'un seul patient.		

StomaMeasure



Le StomaMeasure (mesure du trachéostome) est une règle en plastique qui permet d'estimer le diamètre du trachéostome.

Informations pour la commande	Quantité	RÉF.
StomaMeasure pour LaryTube	1 unité	7807
Non stérile.		

Accessoires

Provox® ShowerAid

Le protecteur de douche Provox ShowerAid est utilisé avec des Provox Adhesives (FlexiDerm ou Regular), en remplacement temporaire d'une Provox HME Cassette pour prendre une douche.

Attention : Ne pas utiliser avec OptiDerm !



Informations pour la commande	Quantité	RÉF.
Provox ShowerAid	1 unité	7260
Non stérile, à usage personnel d'un seul patient, lavage à l'eau bouillante possible. Includ : 1 Provox FlexiDerm Oval Adhesive (7254)		

Provox® BasePlate Adaptor

Le Provox BasePlate Adaptor permet de fixer d'autres dispositifs pourvus d'un connecteur standard ISO 15 mm à un support Provox Adhesive ou une canule Provox LaryTube.

Exemple type : fixation d'un TrachPhone, un HME avec orifice à oxygène intégré.



Informations pour la commande	Quantité	RÉF.
Provox BasePlate Adaptor	1 unité	7263
Non stérile, à usage personnel d'un seul patient.		

Provox® HME Cassette Adaptor

Permet de connecter des Provox HME Cassettes à n'importe quelle canule trachéale dotée d'un connecteur ISO 15 mm.



Informations pour la commande	Quantité	RÉF.
Provox HME Cassette Adaptor	1 unité	7246
Non stérile, à usage personnel d'un seul patient, lavage à l'eau bouillante possible. Includ : 5 Provox HME Cassette HiFlow (7241).		